


Sådan gør du:



Udarbejdet i overensstemmelse med RRA, Fysioterapiens patientvejledning.

Apparatet

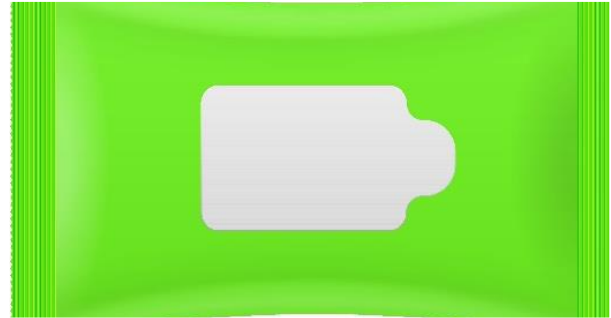


- Tag ledningen ud af stikket
- Tør apparat, bakteriefilter og modstand af udvendigt med grøn wipe




Der må ikke komme fugt ind i selve maskinen

Luftfilter

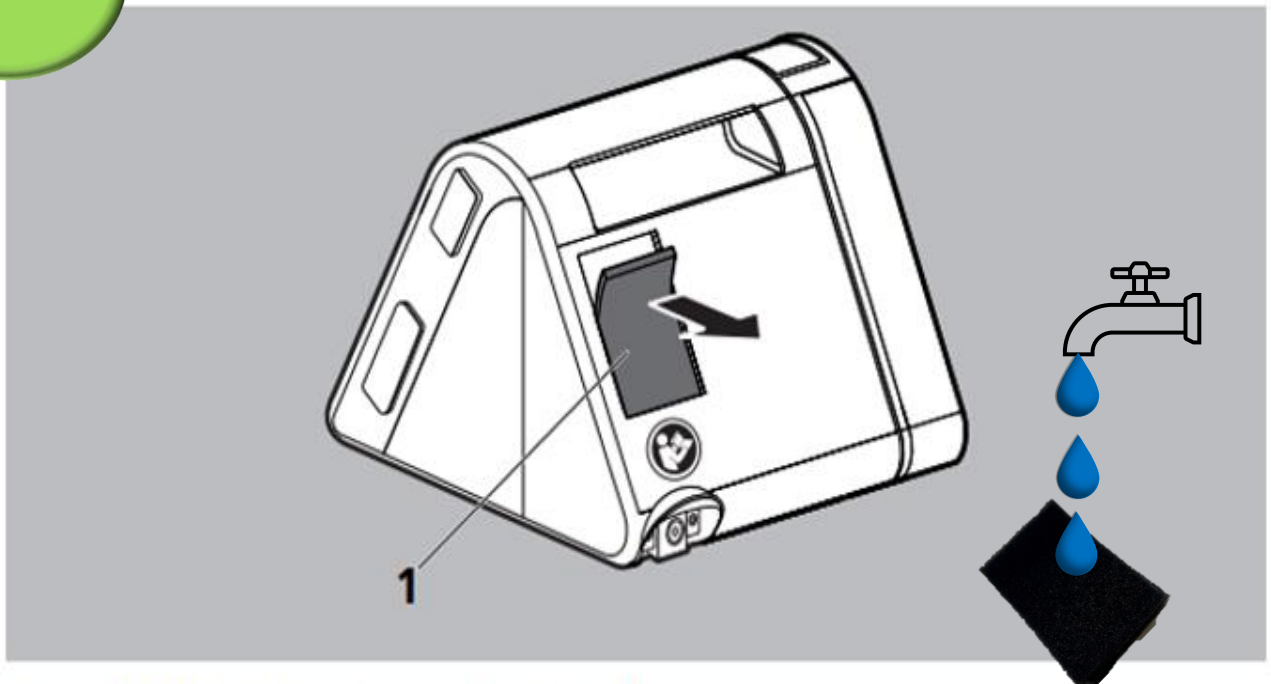


1. Rengør luftfilteret **1** under rindende vand.
2. Lad luftfilteret **1** tørre - på et rent håndklæde/viskestykke

Slange, maske
T-stykke og
forlænger

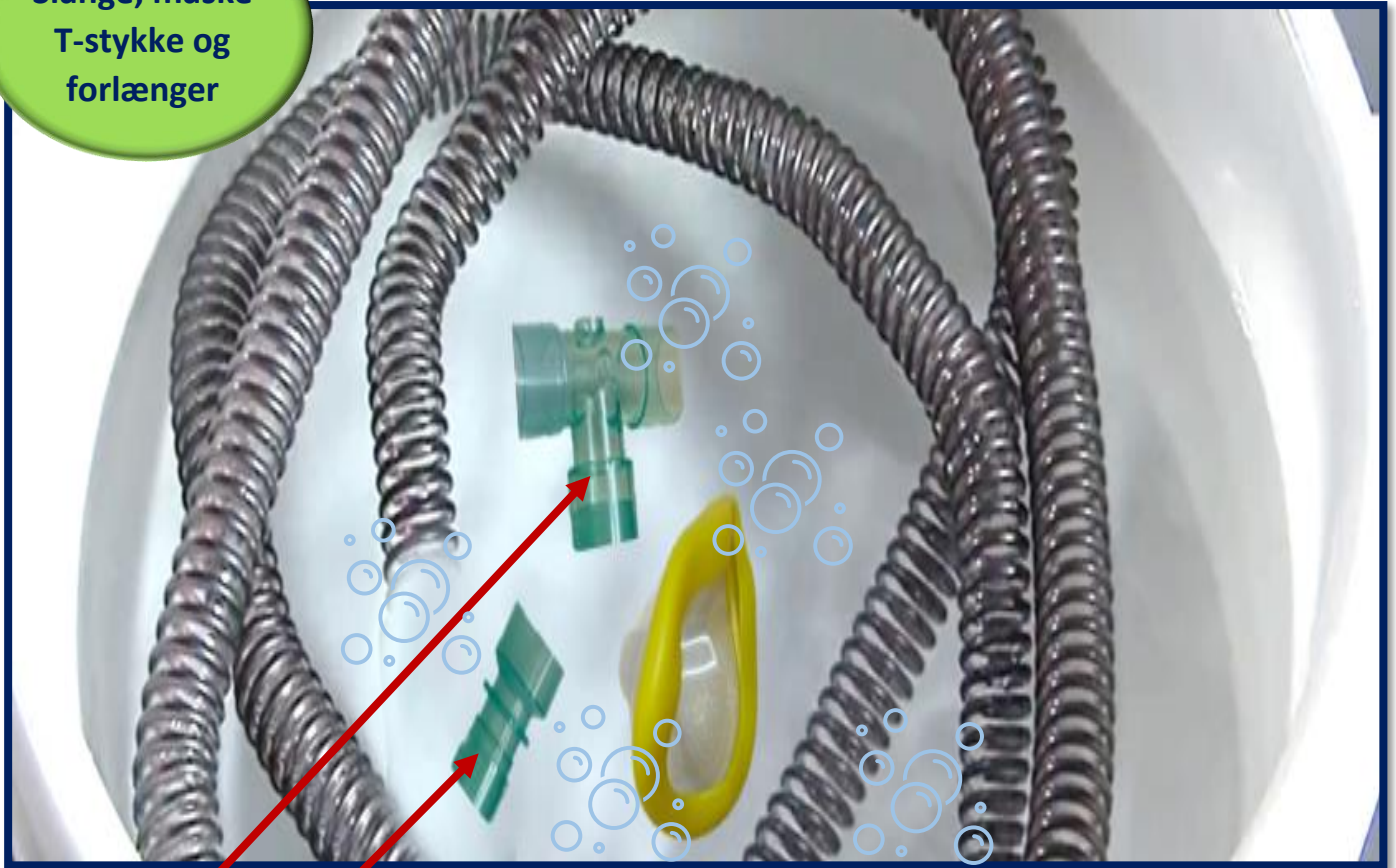

- Vask T-rør, forlænger, maske og slange i en ren balje med varmt sæbevand.
- Sikr dig, at slangen skylles grundigt igennem med sæbevand
- Skyl delene helt fri for sæbe ind- og udvendigt

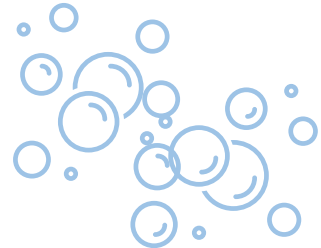

- Tør maske, T-rør og forlænger med et rent viskestykke
- Slangen skal være tør inden for max ½-1 time, ind- og udvendigt - brug evt. føntørrer (kold luft)



- Baljen + opvaskebørste bør ikke bruges til andre formål.
- Brug mild, allergivenligt opvaskemiddel uden parfume