

Hvordan håndteres filter på:


- ResMed Lumis 150 - se lige herunder
- Philips Dreamstation BiPAP – se side 2
- PrismaSmart CPAP m. fugter – se side 3

ResMed Lumis 150:

1. Åbn filterdækslet på siden af maskinen.



2. Udskift filteret med et nyt. Det gamle filter kan hverken vaskes eller genbruges.

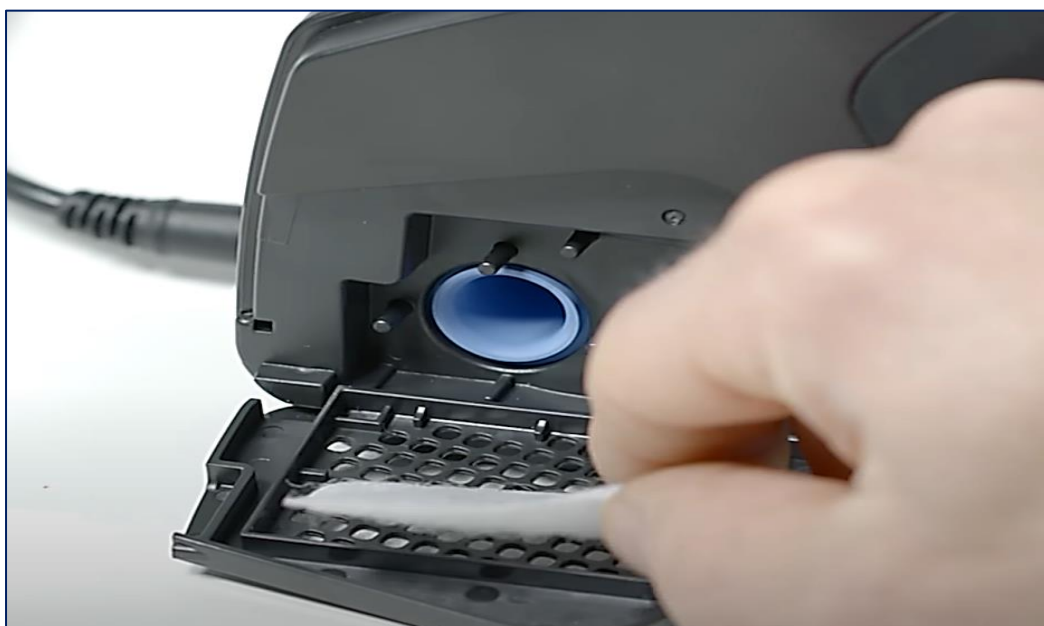

Hvordan håndteres filter på:

Philips DreamStation BiPAP

1. Åbn filterdækslet på siden af maskinen. En DreamStation kan have 2 filtre



Vær opmærksom på:

Begge filtre betragtes som engangsfiltre – *men*

Grov-filteret *kan* tåle at blive skyllet under rindende vand, hvis det trænger til at blive rensat, og man er løbet tør for filtre.

Det lægges til tørre på et rent viskestykke/håndklæde.




Det skal være helt tørt, før det sættes i maskinen igen




Pollen-filteret tåler *ikke* vask

Hvis maskinen bruger begge filtre – skal de samles først, inden de sættes på plads

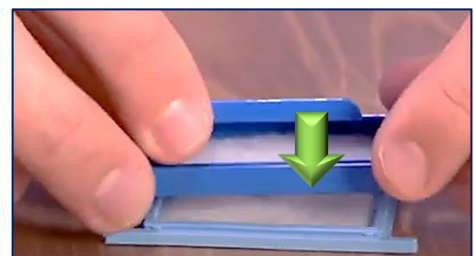

Hvordan håndteres filter på:

PrismaSmart CPAP:

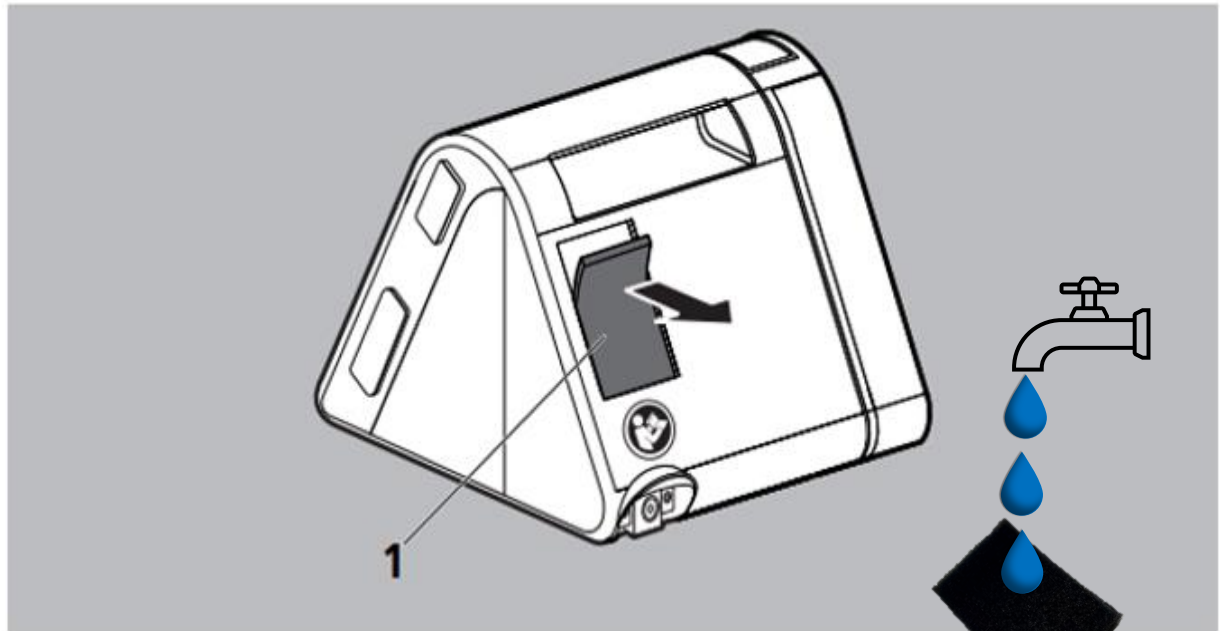

1. Rengør luftfilteret **1** under rindende vand.
2. Lad luftfilteret **1** tørre - på et rent håndklæde/viskestykke